


Vision Hema[®] Basic / Basic AF

Цифровая морфология клеток крови

Рекомендовано
для образова-
тельных целей

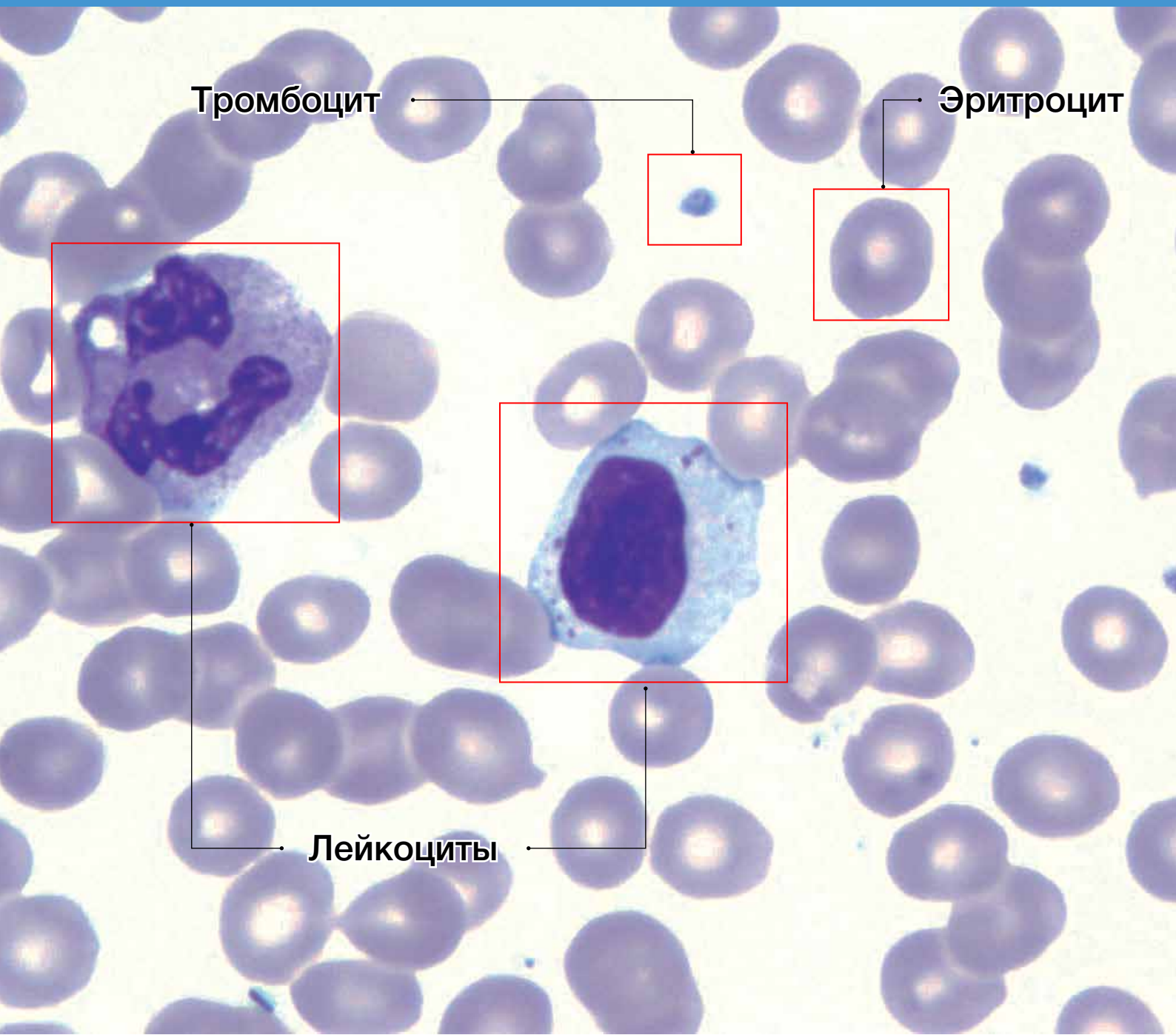


Идеально для образовательных целей

Для медицинских колледжей, университетов, курсов повышения квалификации, клинических исследований и науки

Сочетание инновационной технологии и классической микроскопии расширяет возможности работы

Автофокус*


Автофокус обеспечивает автоматическую наводку объектива на резкость.

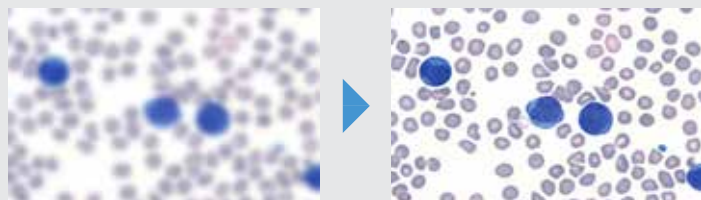


Процедура ручного сканирования

1. Выберите необходимое количество клеток, требуемое для анализа.
2. Перемещайте столик, фокусируясь на клетках крови.
3. Захватывайте желаемые изображения клеток (лейкоцитов, эритроцитов, тромбоцитов).
4. После того как нужное количество клеток крови будет собрано, система выполнит идентификацию и преклассификацию.

*Автофокус доступен только для Vision Hema® Basic AF

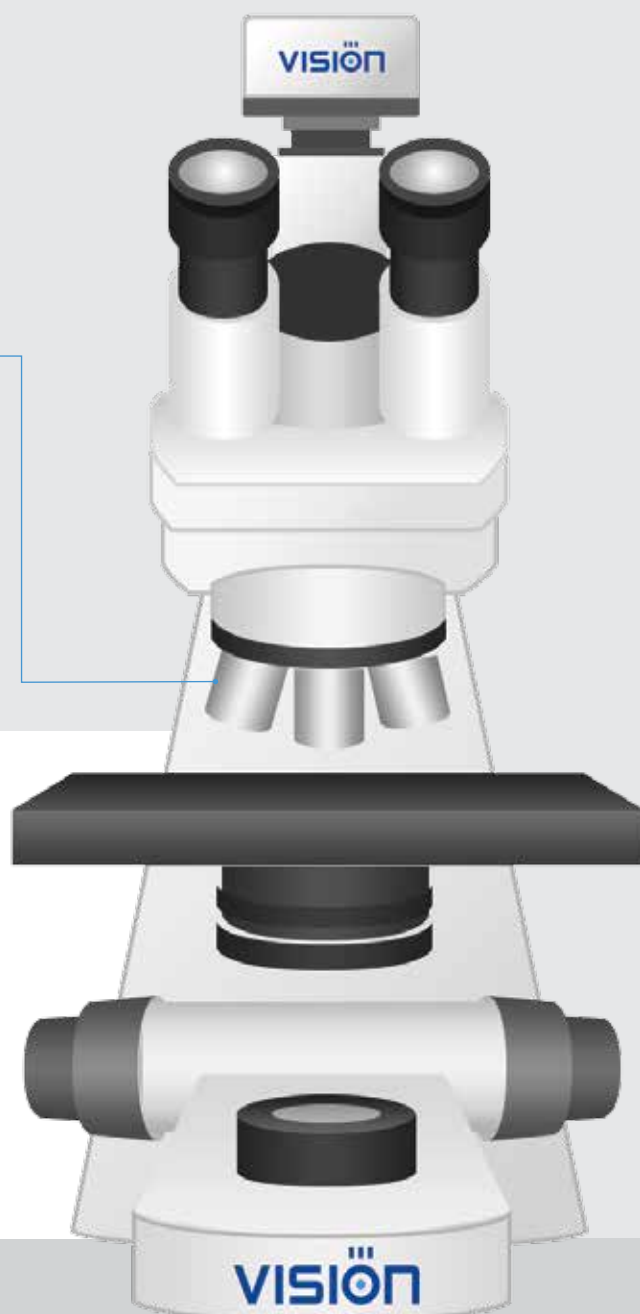

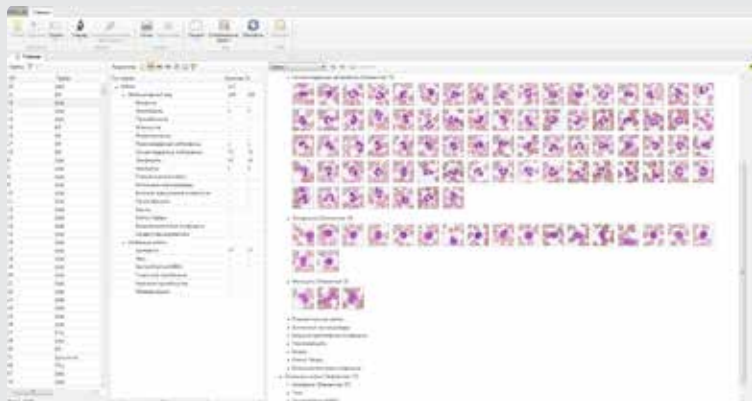

Отчет

Vision Hema® Basic позволяет использовать настраиваемые бланки отчетов.


Атлас

Развивайте свои профессиональные знания путем создания и ведения атласа. Добавляйте в атлас изображения с комментариями для последующего использования.

Контроль качества

Идентификация и преклассификация клеток крови

Сотрудник лаборатории выполняет верификацию результатов анализа, при необходимости проводит коррекцию и утверждает результаты анализа.

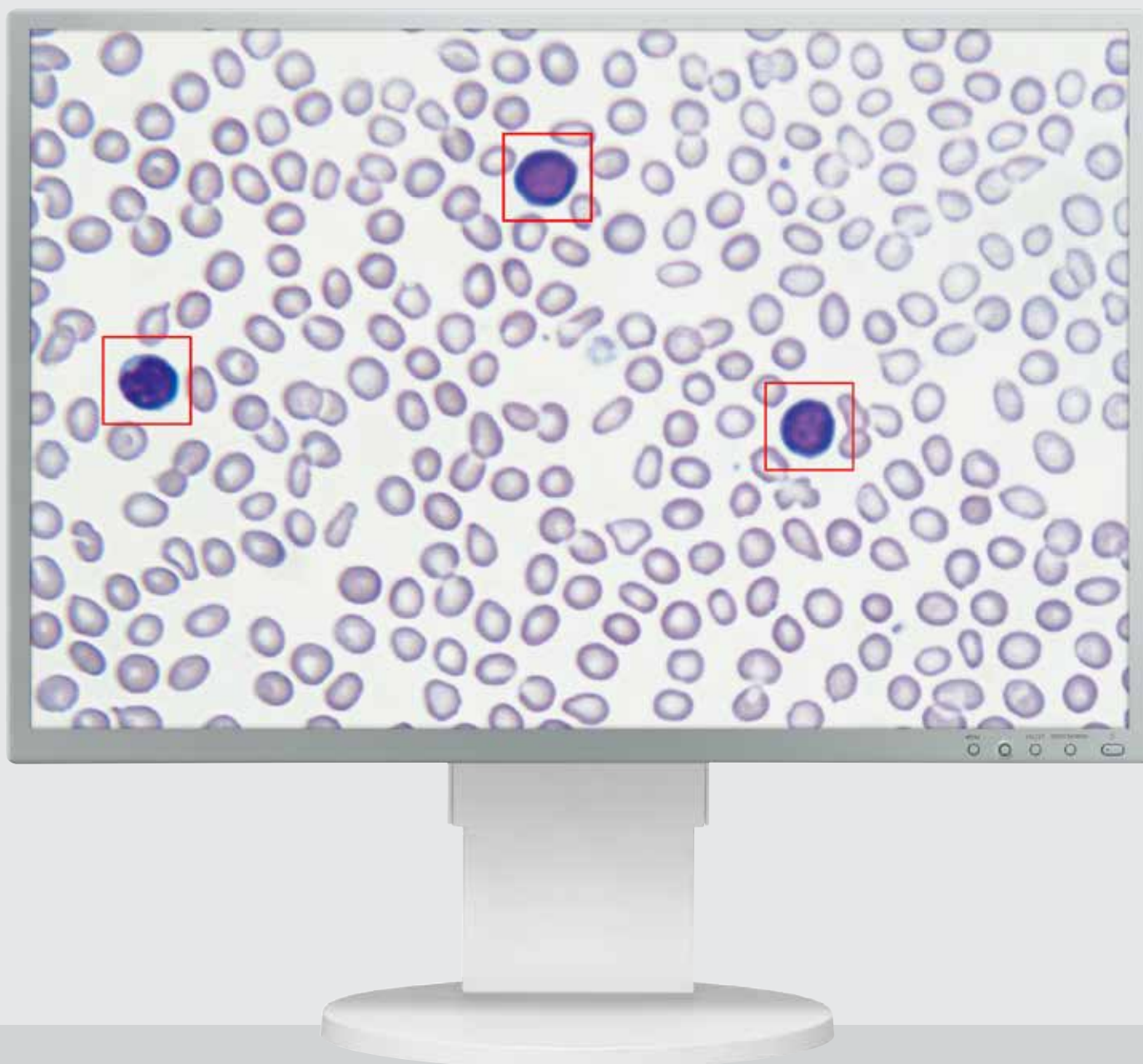

Решение для образования



Обучение

Демонстрация и обсуждение практического и лекционного материала на экране монитора делает процесс обучения нагляднее и легче.



Повышение квалификации

Обновление теоретических знаний и совершенствование практических навыков происходит ежедневно благодаря:

- ведению и использованию атласа
- обсуждению с коллегами и экспертами.



Консилиумы

Устанавливайте точный диагноз, а также тактику и стратегию дальнейшего обследования и лечения совместно с коллегами.



Онлайн тестирование

Стандартизируйте знания и навыки специалистов внутри организации. Современные методики образования экономят ваше время и ресурсы.



Удаленный доступ

Обсуждайте сложные случаи сразу с несколькими специалистами. Проводите видеоконференции с коллегами из разных городов и стран.



Сетевые возможности

Делитесь данными с коллегами. Отправляйте отчеты по электронной почте. Публикуйте работы в специализированных сетях Интернет.



Vision Hema® Expertise

Контроль качества и обучение специалистов

Онлайн-сервис для обучения и оценки профессионального уровня специалистов в области морфологии клеток крови.

www.vision-expertise.com

Мы оставляем за собой право изменять спецификации без предварительного уведомления



VISION

www.wm-vision.com

Franz-Siegel-Gasse 1
2380 Perchtoldsdorf, Austria
tel.: +43 (1) 804 81 84
fax: +43 (1) 804 81 85
vienna@westmedica.com

ул. Шереметьевская, 85, стр. 5,
Москва, 129075
тел./факс: +7 (495) 787 44 01
горячая линия: +7 (800) 100 14 20
moscow@westmedica.com



www.westmedica.com