

HEINE OPTOTECHNIK

Проктология



Одноразовые тубы HEINE UniSpec®



85x20 мм 130x20 мм 250x20 мм

- **Одноразовые.** Исключение перекрестных инфекций.
- **Не требуют очистки.** Экономия времени.
- **Комфортный для пациента пластиковый материал.** Отсутствие ощущения холода при введении.
- **Световая передача через стенки тубы. Дистальное кольцевое освещение.** Яркое, безрефлекторное и гомогенное освещение поля исследования.
- **Сантиметровая шкала.** Индикация глубины введения и комфортность.

Одноразовые anosкопы UniSpec (85x20 мм)

Комплект из 25 шт.	E-003.19.925
Комплект из 100 (4 упаковки по 25) шт.	E-003.19.911

Одноразовые проктоскопы UniSpec (130x20 мм)

Комплект из 25 шт.	E-003.19.825
Комплект из 100 (4 упаковки по 25) шт.	E-003.19.811

Одноразовые сигмоидоскопы UniSpec (250x20 мм)

Комплект из 25 шт.	E-003.18.825
Комплект из 100 (4 упаковки по 25 шт.)	E-003.18.811

Тубы с прямым обзором



60x22 мм 120x22 мм

Аноскоп/проктоскоп с проксимальным освещением.

- **Угловой дистальный конец тубы** гарантирует хороший осмотр и простой доступ инструментария.
- **Металлическая конструкция** упрощает очистку и дезинфекцию обычными методами.

Тубы с прямым обзором

Аноскопическая туба 60x22 мм в комплекте с obtуратором	E-000.19.111
Проктоскопическая туба 120x22 мм в комплекте с obtуратором	E-000.19.107

Аноскопы с кольцевым Ф.О. освещением HEINE F.O.



70x25 мм 70x20 мм 70x15 мм

- **Три различных диаметра: 15, 20 и 25 мм.** Широкий спектр размеров.
- **Кольцевое фиброоптическое освещение.** Яркое, безрефлекторное освещение поля зрения.
- **Угловой край тубы.** Гарантия хорошего осмотра и простота доступа инструментария.
- **Закругленный проксимальный наконечник.** Простота введения и вращения.
- **Разбираемая туба.** Легкость очистки и дезинфекции обычными средствами.
- **Металлическая конструкция.** Прочность и долговечность.

Аноскопы

Аноскопы	Ф.О.
Аноскопическая туба 70x25 мм в комплекте с obtуратором	E-003.19.325
Аноскопическая туба 70x20 мм в комплекте с obtуратором	E-003.19.320
Аноскопическая туба 70x15 мм в комплекте с obtуратором	E-003.19.315

Проктоскоп с дистальным кольцевым освещением HEINE F.O.




Освещение при помощи Ф.О. кабеля и Ф.О. источника света, ламповой рукоятки или осветительного адаптера (X-002.98.002).

- ⋆ **Дистальное кольцевое фиброоптическое (Ф.О.) освещение.** Яркое, безрефлекторное освещение поля исследования.
- ⋆ **Увеличивающая линза 1,8x.** Высокое разрешение.
- ⋆ **Поворачивающееся обзорное окно с инсuffляционным портом.** Улучшение обзора за счет инсuffляции.
- ⋆ **Угловой край тубы.** Гарантия хорошего осмотра и простота доступа инструментария.
- ⋆ **Отвинчивающийся наконечник.** Легкость очистки и дезинфекции обычными средствами.
- ⋆ **Металлическая конструкция.** Прочность и долговечность.

Проктоскоп	Ф.О.
Проктоскоп 130x20 мм в комплекте с obtуратором, обзорным окном, шарнирной линзой и сменным наконечником	E-003.19.213
Проктоскопическая туба без obtуратора [01]	E-003.19.013
Obтуратор [02]	E-003.19.113
Наконечник для тубы [03]	E-003.19.095
Обзорное окно [04]	E-003.18.099
Шарнирная линза 1,8x [05]	E-003.19.099

Сигмоидоскопы с дистальным кольцевым освещением HEINE

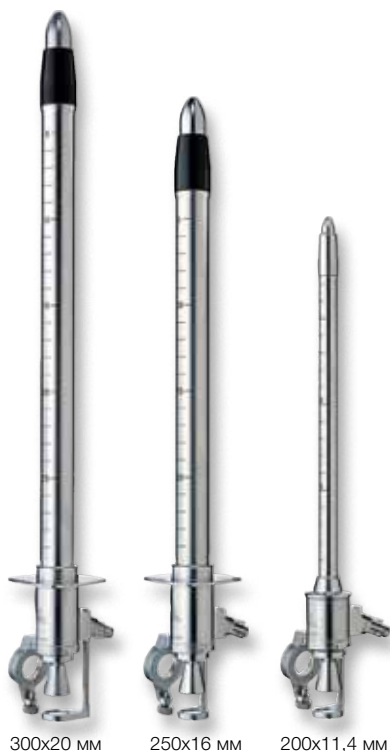

Освещение при помощи Ф.О. кабеля и Ф.О. источника света, ламповой рукоятки или рукоятки ВЕТА с осветительным адаптером (X-002.98.002).

- ⋆ **Доступны версии следующих размеров (мм): 300x20, 250x20, 200x20, 250x16, 200x11,4.** Для пациентов любого возраста.
- ⋆ **Дистальное кольцевое фиброоптическое (Ф.О.) освещение.** Яркое, безрефлекторное освещение поля исследования.
- ⋆ **Увеличивающая линза 1,5x.** Высокое разрешение.
- ⋆ **Открывающееся обзорное окно с инсuffляционным портом.** Улучшение обзора за счет инсuffляции.
- ⋆ **Сантиметровая шкала.** Индикация глубины введения и комфортность.
- ⋆ **Замкнутый пластиковый наконечник.**
- ⋆ **Отвинчивающийся наконечник.** Легкость очистки и дезинфекции обычными средствами.
- ⋆ **Металлическая конструкция.** Прочность и долговечность.

Сигмоидоскопы	Ф.О.
Сигмоидоскоп 300x20 мм в комплекте с obtуратором, обзорным окном, шарнирной линзой и сменным наконечником	E-003.18.230
Наконечник для тубы	E-003.18.095
Сигмоидоскоп 250x20 мм в комплекте с obtуратором, обзорным окном, шарнирной линзой и сменным наконечником	E-003.18.225
Наконечник для тубы	E-003.18.095
Сигмоидоскоп 200x20 мм в комплекте с obtуратором, обзорным окном, шарнирной линзой и сменным наконечником	E-003.18.220
Наконечник для тубы	E-003.18.095
Сигмоидоскоп 250x16 мм в комплекте с obtуратором, обзорным окном, шарнирной линзой и сменным наконечником	E-003.18.525
Наконечник для тубы	E-003.18.088
Сигмоидоскоп 200x11,4 мм в комплекте с obtуратором, обзорным окном, шарнирной линзой и сменным наконечником	E-003.18.240
Наконечник для тубы	E-003.18.094
Обзорное окно [01]	E-003.18.099
Шарнирная линза 1,5x [02]	E-003.18.096



Сигмоидо/проктоскопический набор RE 7000



Комплект для обычного ректального исследования. Улучшенное освещение при помощи Ф.О. источника света НК 7000.

Набор включает: инструментальную головку для одноразовых туб UniSpec с обзорным окном и линзой 1,5х; сигмоидоскопические тубы UniSpec 250 мм (упаковка 25 шт., одноразовые); проктоскопические тубы UniSpec 130 мм (упаковка 25 шт., одноразовые); аноскопические тубы UniSpec 85 мм (упаковка 25 шт., одноразовые); захватывающие щипцы; инсuffляционную грушу; Ф.О. источник света НК 7000 150 Вт с фиброоптическим кабелем.

Сигмоидо/проктоскопический набор RE 7000	Ф.О.
Сигмоидо/проктоскопический набор RE 7000	E-096.15.501
Ксенон-галогеновая лампа XHL, 150 Вт	Y-096.15.102

Проктологические наборы HEINE



Набор В:

Ф.О. проктоскоп с obturatorом, запасная лампа, Ф.О. сигмоидоскоп с obturatorом **300x20 мм**, захватывающие щипцы, отсасывающая трубка, телескоп, инсuffляционная груша и твердый кейс E-066.00.000.

Проктологические наборы	6 В
6 В трансформатор E7 с рукояткой и выключателем	E-066.30.616
Ф.О. источник света и кабель*	E-066.30.960

* При формировании заказа необходимо указывать источник света и кабель отдельно. Другие доступные наборы отражены в прайс-листе.

Сборные проктологические наборы



Прокто/сигмоидоскопический набор: проктологическая осветительная головка 3,5 В, Ф.О. сигмоидоскоп 250x20 мм в комплекте с obturatorом и принадлежностями, проктоскопическая туба с боковым обзором 100x20 мм, отсасывающая трубка, осветительный адаптер 3,5 В (X-002.98.002), ксенон-галогеновая лампа XHL 3,5 В для E-002.19.132 и ксенон-галогеновая лампа XHL 3,5 В для X-002.98.002.

Проктологические наборы	3,5 В (NiMH)	3,5 В
Перезаряжаемая рукоятка BETA NT с зарядным блоком NT 300	E-218.20.420	
Перезаряжаемая рукоятка BETA L с зарядным блоком NT 300		E-218.29.420

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG
Kientalstr. 7 · 82211 Herrsching · Germany
Tel.: +49 (0) 81 52-38 0 · Fax: +49 (0) 81 52-3 82 02
info@heine.com

HEINE CIS Representative WEST MEDICA
Hegelgasse 19 · A-1010 · Vienna · Austria
Tel.: +43 (1) 804 81 84 · Fax: +43 (1) 804 81 85
vienna@westmedica.com

www.heine.com · www.heineopto.ru

HEINE Russia Representative WEST MEDICA
ул. Шереметьевская 85 · стр. 2 · Москва · 129075
Тел.: +7 (495) 940-61-33 · Факс: +7 (495) 619-98-84
moscow@westmedica.com

Санкт-Петербург: (812) 324-27-78
Ростов-на-Дону: (863) 268-94-81
Пермь: (342) 220-65-51
Новосибирск: (383) 227-67-34

Официальный дистрибьютор