



**APEL CO., LTD. JAPAN**

**MADE IN JAPAN**

**State-of-the-art  
Bilirubin Meter**

# BR-5200

**Билирубинометр с интеллектуальным управлением**



**Free of  
calibration  
hassle**

После одной калибровки BR-5200 не требует ежедневной калибровки

**Включите и начните измерения после 60 секунд прогрева прибора**

**Очень быстрые измерения**

Максимальное время измерения 1 секунда

**Не требуется замена лампы**

BR-5200 не требует замены лампы благодаря светодиодному источнику света

**Компактный и легкий**

BR-5200 занимает мало места и весит всего 1,7 кг

**Подключение принтера и компьютера**

BR-5200 имеет RS-232C и USB интерфейс для подключения к компьютерам



Предусмотрен USB порт для подключения к компьютеру



Данные измерений отображаются на дисплее

# BR-5200

Билирубинометр с интеллектуальным управлением




1 Включите переключатель на задней панели



2 Прибор готов к измерению



3 Вставьте капилляр (содержащий образец) в держатель

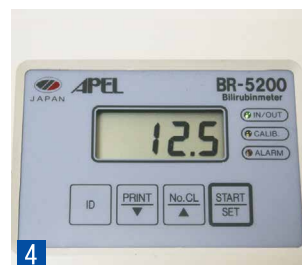

4 Результат появляется очень быстро (в течение одной секунды)

## Спецификации:

Метод	Двухволновое измерение
Диапазон измерений	0-30 мг/дл (общий билирубин)
Точность измерений	±5%
Объем пробы	50-60 мкл
Дисплей	Большой LCD дисплей
Емкость для образца	Капилляр (гематокритный)
Источник света	Белый светодиод высокой яркости
Датчик	Кремниевый фотозлемент
Интерфейс	RS-232C, USB
Мощность	12 В 0,8 Вт
Габариты	150 x 200 x 100 мм
Вес	0,9 кг

Технические характеристики и внешний вид могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Комплектация:

Описание	Количество
Капилляры гепаринизированные (красная крышка флакона)	1 флакон (100 шт.)
Капилляры стандартные (синяя крышка флакона)	1 флакон (100 шт.)
Подставка для капилляров	1 шт.
Стандартный раствор	2 флакона
USB кабель	1 шт.
Драйвера для USB подключения (CD-ROM)	1 шт.
Блок питания (внешний)	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.

## Дополнительно:

Принтер для BR-5200	Серийный тип (с кабелем подключения и AC/DC адаптером)
---------------------	--

MADE IN JAPAN



APPEL CO., LTD. JAPAN

Website [www.apel-jp.ru](http://www.apel-jp.ru)

Website [www.apel.co.jp](http://www.apel.co.jp)